




オゾン水ジェット口腔洗浄器

DENT PEACE JET

型式 TT-DPJ01

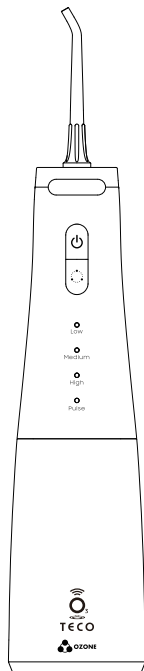

株式会社タムラテコ

このたびは本製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。
お使いになる前に、この取扱説明書をよく読んで正しくご使用ください。
この取扱説明書はいつでもご覧になれるところに大切に保管してください。

目次

はじめに	・・・・・・・・・・	2
安全にお使いいただくために	・・・・・・・・・・	3
各部の名称とはたらき	・・・・・・・・・・	5
ノズルについて	・・・・・・・・・・	6
お使いになる前に	・・・・・・・・・・	7
操作方法と表示ランプについて	・・・・・・・・・・	9
口腔内洗浄のしかた	・・・・・・・・・・	11
お手入れ	・・・・・・・・・・	13
故障かな？と思ったときは	・・・・・・・・・・	15
製品仕様	・・・・・・・・・・	17
アフターサービス	・・・・・・・・・・	18
保証規定・保証書	・・・・・・・・・・	19

はじめに

【本製品の特長】

オゾン水ジェット口腔洗浄器 DENT PEACE JET は、水道水の直接的な電気分解によって生成させたオゾン水によって口腔内洗浄を行います。生成されたオゾン水は、副生成物がなく、使用後は短時間で水と酸素に戻るため、環境にやさしく安心してご使用いただけます。

オゾン水ジェット口腔洗浄器 DENT PEACE JET は、毎分 1200 回のパルス状の噴射が可能で、効果的な口腔内洗浄にご活用いただけます。

4 つのモード設定と様々なニーズに対応した 5 種類のノズルが付属していますので、お好みに応じた口腔内洗浄が可能です。

【取扱説明書の表記について】

本書には製品を正しくお使いいただき、人体への危険や、財産への損害を未然に防止するための表示を記載しています。表示の記号と意味は以下の通りです。

危険のレベル



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容を示します。

シンボル（絵表示）の意味



安全にお使いいただくために

本製品を誤った取り扱いをした場合に生じる危険とその程度を説明するものです。
安全にお使いいただくために、以下の事項を必ずお守りください。

警告



ぬれた手でACアダプタ、USBコネクタの抜き差しをしたりしない
傷害や感電の原因となります。



濡れた場所や水が掛かる場所では充電しない
製品を水没させない



傷んだ充電ケーブルで充電をしない。
充電ケーブルを釘やピンなどで固定しない
破損し、火災や感電の原因となります。



付属品以外の充電ケーブルを使って充電しない
発火、また故障の恐れがあります。



本製品の分解、また修理や改造をしない
火災や感電の原因となります。



故障や異常を感じたら使用を取りやめる
破損した状態で使用しない。



定格容量の足りないACアダプタで充電しない



お手入れの際は、必ず本体の電源をオフにする
感電の原因となります。



ドライヤーやヒーターを向けない
故障の原因となります。



注意



次のような場所に保管しない

- 火気を取り扱う場所の付近
 - 40℃以上の高温になる場所
 - 直射日光が当たる場所
 - 油が付着する場所
 - ほこりが多い場所
 - 雨風にさらされる場所
 - 凍結の恐れがある場所
 - 振動や傾斜で不安定な場所
- 火災や故障の原因となります。



お手入れの際、次のようなものを使用しない

- シンナー
 - ベンジン
 - ガソリン
- 変形や変色やひび割れの原因となります。



お湯を使用しない

火傷や故障の原因となります。



落下や転倒させたり、衝撃を与えたりしない

けがや故障の原因となります。



口腔内洗浄以外の目的で使用しない

常温の水道水以外で使用しない

水に洗口剤やうがい薬、塩、歯磨き粉などを含ませて使用しない。
故障の原因となります。



使用して気分が悪くなったり、異常を感じたら使用
を取りやめる



お子様やお体の不自由な方など補助を必要する方
に使用させない



口腔内の感覚の鈍い方は使用しない

治療中の歯や不安定な入れ歯を装着した状態で使
用しない



過去数か月以内に歯や口腔内の治療を行っている
場合は歯科医に相談をする



歯周病の疑いのある場合や口腔内に気になる症状
がある場合は、使用前に歯科医に相談する



小さなお子様の手に触れるところに保管しない
事故やけがの原因となります。

各部の名称とはたらき

ノズル

口腔内洗浄を行うオゾン水を噴射するノズルです。
5種類ノズルがあり、付け替えることができます。

ノズル取り外しボタン

装着したノズルを取り外すときに押したままにします。

モード設定ボタン

噴射するモードを選択するボタンです。充電状態やバッテリー残量確認にも使用します。


充電ポート（背面）

充電用のコネクタです。
付属の充電ケーブルとUSB電源を接続して充電します。



給水タンク

水道水を入れるタンクです。
背面に給水口があります。
※検査時の水が残っていることがあります、異常ではありません。

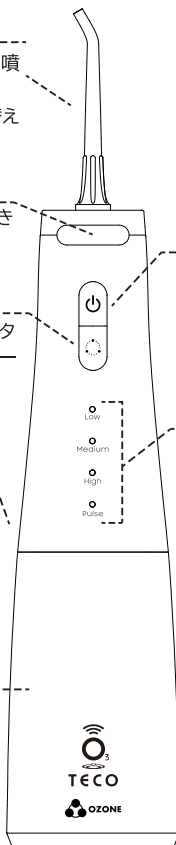

電源 / 噴射ボタン

電源の投入、噴射の開始、停止を行うボタンです。

モード表示ランプ

選択されたモードを表示する4つのランプです。
充電状態の表示、バッテリー残量の確認にも使用します。

ノズルについて

本製品には5種類のノズルが各1本付属しています。
6か月ごとに交換をお勧めします。

	ノズルの種類	ノズルの説明
	標準ノズル	日常の口腔内、歯間洗浄に最適な標準のノズルです。
	プラークノズル	歯垢、プラークの除去のためのノズルです。
	歯周ポケットノズル	歯周ポケット洗浄のためのノズルです。
	舌ブラシノズル	舌の洗浄のためのノズルです。
	矯正用ノズル	歯の矯正器具を付けた方向へのノズルです。 歯科器具で洗浄できないところを洗浄できます。



舌ブラシノズルを使用するときは、舌に炎症などが生じた場合は、使用を取りやめ炎症が治まらない場合は医師に相談をしてください。

お使いになる前に

充電

初めて使用するときは、最初に付属の専用充電ケーブルとUSB電源を接続し、満充電まで充電してください。

※充電中は製品を使用できません。

※充電ポートには、防水用のキャップが装着されています。充電の際は充電キャップを開け、充電後にはしっかりと充電キャップを閉めてください。

※USB-ACアダプタは付属していません。

5W(1.0A)出力のUSB Type-Aポートを有したACアダプタなどUSB電源を別途ご用意ください。

防水キャップを開け、コネクタを接続

USB電源へ接続



水濡れ厳禁




充電ポートに水がついた場合は、充電を行わないでください。
充電ポートが完全に乾いていることを確認してから充電接続をしてください。


タンクへの給水

※給水タンクに水を入れるときは、製品の電源がOFFになっていることを確認してください。


タンク背面の給水口を開け、水道水を入れてください。
水道水を入れたのち、給水口をしっかりと閉めてください。

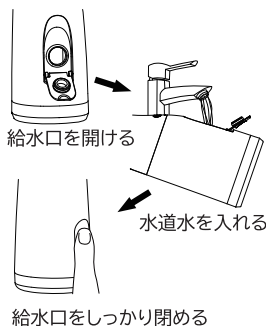

タンクを取り外し、タンク上の開口部から給水することもできます。
タンクを外すには、上部本体とタンクをねじるようにしてまわし、タンクを下に引き抜きます。

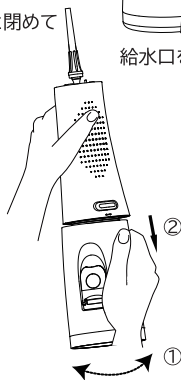

水道水を入れる

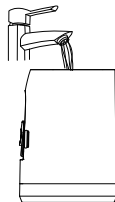

ノズルの取り付け / 取り外し

ノズルの取り付け

ノズルを製品上部の取付穴にまっすぐ挿し込み、「カチッ」と音がするまで挿し込みます。ノズルは向きを回転させることができ、水の噴射方向を調整できます。
※ノズルの挿し込みが不十分な場合、漏水の原因となります。しっかりと挿し込んでご使用ください。



ノズルの取り外し

ノズルを交換する場合は、ノズル取り外しボタンを押しながらノズルをまっすぐ引き抜きます。





暖機運転

最初にお使いになる際や1～2週間以上ご使用にならなかった場合に、オゾン水の生成を安定させるための暖機運転が必要になります。


暖機運転の手順

1. タンクに水道水を入れます。
 2. HIGHモードの設定で1回分捨て水をします。
- 電源/噴射ボタンを押し、水を噴射させ、内部に通水、暖機運転をします。
※動作させたときに水が勢いよく噴射されますので、タオルをあてるなどして水が飛び散らないようにしてください。

タンク一杯に水道水を入れます。

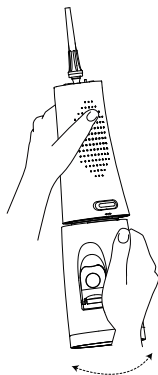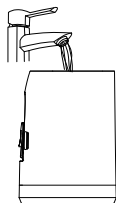

HIGHモードで自動で噴射が止まるまで、一回分捨て水をします。

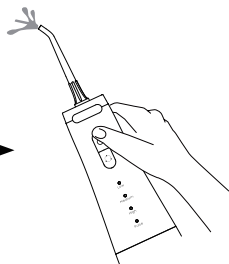


操作方法と表示ランプについて

基本の操作

設定されているモードの確認

口腔内洗浄を開始する前にモードの確認、設定を行います。
モード設定ボタンを短く1回押すと、設定されているモードに対応するランプが点灯します。

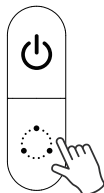


モード設定ボタン
を短く1回押す


設定モードの変更

つづけてモード設定ボタンを押すと、設定モードが切り替わり、対応するランプが切り替わります。好みの設定モードに切り替えてください。

※設定したモードは、保持されます。

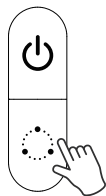

モード設定ボタン
を短く1回押す

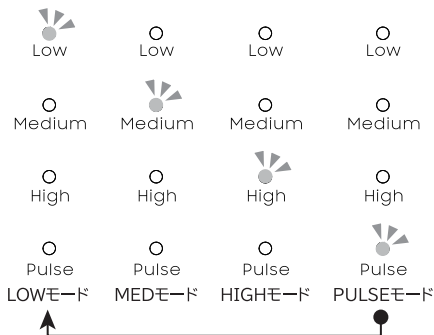


ボタンを押すごとに
LOWモード→MEDモード→HIGHモード→PULSEモード
と切り替わります。

準備完了


モードの設定が完了したら、準備完了です。
電源/噴射ボタンを押すと噴射が開始されます。

バッテリーの残量の確認

モード設定ボタンを3秒間長押しすると、バッテリー残量をランプの点灯状態で確認することができます。

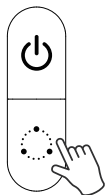

モード設定ボタン
を3秒間長押し

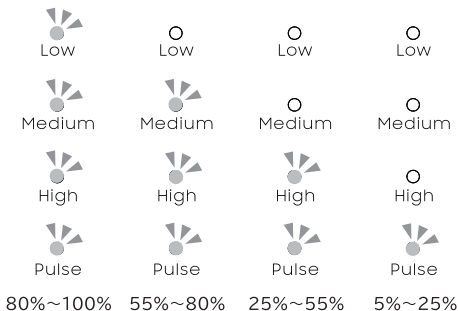


充電中の表示

4つのランプで充電状態を確認することができます。

充電中は、4つのランプが順番に点灯、点滅を繰り返します。

充電が完了すると、4つのランプがすべて点灯し、3分後消灯します。

※バッテリー残量が0%から満充電までの時間の目安：約5.5時間

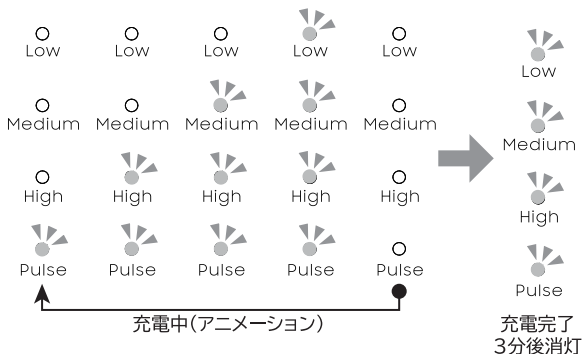


口腔内洗浄のしかた

お口の洗浄をする

口腔内洗浄を行うときは、洗浄後の水が飛び散らないように、洗面台の上に少し前屈みになった姿勢をとります。

ノズルを口に挿入し、歯、歯茎、または歯の間に向けて噴射します。ノズルを回転させて水の噴射方向を調整し、水流が洗浄対象に対して垂直であることを確保してください。口から水が流れ出るので、口を少し開けて洗面台に流してください。

電源/噴射ボタンを押すと、製品の動作が始まります。ノズルの特性に合わせてお口を洗浄してください。

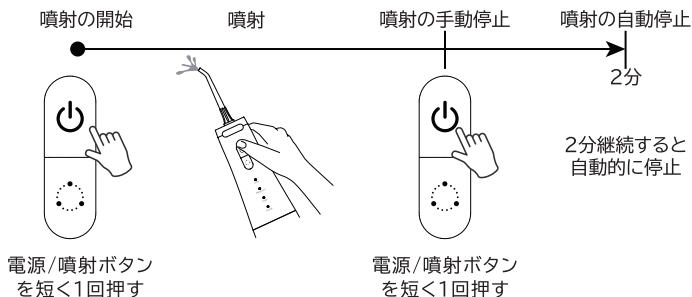

初めて製品を使用する場合は、LOWモードから始め、口が慣れてきたら徐々に高いモードに切り替えて使用してください。

場合によっては、かゆみや歯ぐきからのわずかな出血が発生することがありますが、これは正常であり、通常は1～2週間以内に治まります。出血が治まらない場合や異常を感じたら使用を取りやめ、歯科医にご相談ください。

オゾン水自体には毒性はなく、飲み込んでも害はありません。

しかし、独特の匂いや味があるため、飲用はおやめください。

ごくまれに喉の違和感や咳を生じることがあります。

症状が治まらない場合や異常を感じたら使用を取りやめ、歯科医など専門家にご相談ください。

口腔内洗浄のコツ

標準ノズルを例に洗浄のコツを説明します。

良好な洗浄効果を得るために、奥歯から始めて前歯に向かって洗浄してください。

洗浄するときは、ノズルを歯肉ラインに沿って90°垂直に動かし、歯の間に水を通すようにすると効果的です。



歯と歯肉の間や歯と歯の隙間に水を通すように洗浄します。



歯と歯肉の間に沿わせるように洗浄します。



ノズルを口の奥まで押し込まないよう注意してください。


またノズルの先端が歯肉や歯に強く当たらないように注意してください。

バッテリー残量低下の場合

使用中に、製品が急に動作を停止し、すべてのランプが5回点滅したときは、製品のバッテリー残量が不足しています。製品を充電してからご使用ください。

ご使用後

使用後は、給水口を開け、給水タンク内部の残りの水を捨ててください。次に本体内の水を排出するため、水が出なくなるまで噴射をしてください。水が掛からない清潔な場所で乾燥をさせてください。

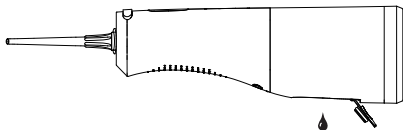

お手入れ

本体のお手入れ

きれいな水または中性洗剤をしみこませた柔らかい布で拭き上げます。



製品の損傷や製品の性能の低下を避けるため、45℃以上のお湯を使わないでください。

製品を水に沈めての洗浄は行わないでください。


給水タンクのお手入れ

図のように製品を持ち、給水タンクを時計回り方向に回してから下に引き抜くようにして取り外します。

給水タンク内部は洗剤を使用せず、常温のきれいな水ですすいでください。

またタンク上部の弁を流水で流しながら指先で揉むようにして洗浄してください。

洗浄後、給水タンクの水気をきり、乾燥させてから本体に装着します。

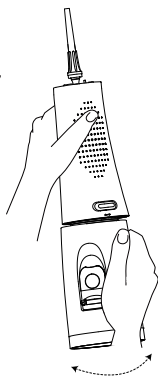

ノズルのお手入れ

ノズルはご使用のたびに取り外し洗浄を行って、清潔な場所で乾燥させてください。ノズルの内部を洗浄するには、ノズルの根本から内部に通水するようにして洗浄を行ってください。

※ノズルは6か月を目安に交換することをお勧めします。



感染症予防のため、ノズルは個人で使い分けることをお勧めします。


性能を維持するために（定期的なメンテナンス）

製品を長く性能を保った状態でお使いいただくために、1～3ヶ月ごとに内部に温水で通水し洗浄を行ってください。

定期的なメンテナンスを行わないと、水のミネラル含有量によっては、硬水の沈殿物が製品内部に蓄積する場合があります。硬水の沈殿物を長時間取り除かないと、製品の性能が低下します。

ノズルを洗面台に向け、製品の電源を入れ、水がなくなるまで運転してから、給水タンクにきれいなぬるま湯を入れ、上記の操作を繰り返して洗浄してください。

※動作させたときに水が勢いよく噴射されますので、タオルをあてるなどして水が飛び散らないようにしてください。

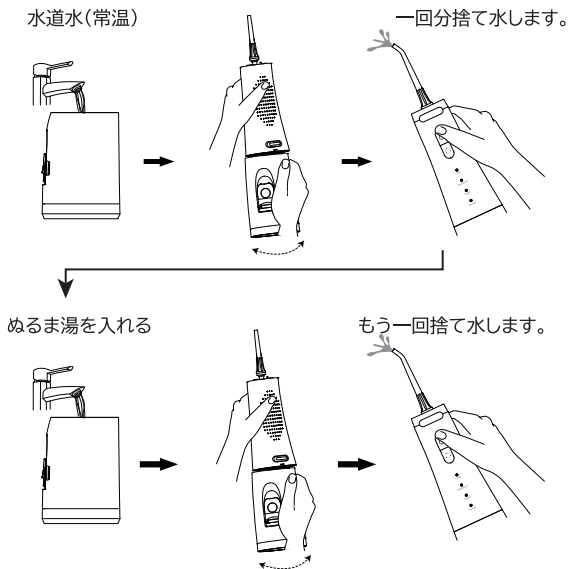

故障かな？と思ったときは

Q1 電源が入らない

バッテリー残量が少なくなっています。



充電を行ってください。

ボタンがきちんと押せていない



ボタンを複数回押して、動作を確認してください。

Q2 充電できない

コネクタの押し込みが不十分、接触不良



充電コネクタを抜き差ししてください。充電ポートが水に濡れていないか確認してください。

付属でない充電ケーブルを使用している



付属の充電ケーブルを用いて充電を試してください。

USB電源の容量が足りていない



パソコンなどのUSBポートから充電すると容量が足りず、充電できないことがあります。

Q3 ノズルから水漏れがする

ノズルと本体の間で水漏れが発生する



ノズルがきちんと取り付けられているか確認してください。

ノズルやパッキンが損傷している



販売店またはお問い合わせ先までご相談ください。

Q4 タンクから水漏れがする

給水口の閉め方が不十分



給水口がしっかりとしまっているか確認してください。

パッキンの劣化や損傷



販売店またはお問い合わせ先までご相談ください。

Q5 タンクが外れない

タンク内が水の吸い上げにより負圧になっている



給水口を少し開け中に空気を取り込ませてから開けてください。
タンク上部の弁がふさがっていないか確認し、タンクの洗浄してください。

Q6 水が出ない

バッテリー残量低下によるパワー不足



充電を行ってから、再度試してください。

ポンプが水を吸い上げられていない



ノズル取り付け部に少量の水(呼び水)を入れ、動作を再確認してください。
またタンク上部の弁がふさがっていないか確認し、タンクを洗浄してください。

Q7 故障、破損した

ノズルが折れてしまった。



無理に取り出そうとせず、販売店またはお問い合わせ先までご相談ください。

落下させ、破損させた



使用を取りやめ、販売店またはお問い合わせ先までご相談ください。

トラブルが解消しなかったり、その他の故障を生じたりした場合は、販売店またはお問い合わせ先までご相談ください。

製品仕様

製品名	デントピースジェット
型式	TT-DPJ01
オゾン水生成方式	電解式
オゾン水濃度	0.6 ~ 0.8ppm
使用水温度	5℃~40℃
モード	LOWモード MEDモード HIGHモード PULSEモード
USB 充電入力	専用コネクタ / DC 5V / 1.0A
バッテリー	Li-ion バッテリー2500mAh / 3.7V
使用環境温度・湿度	5℃~35℃ / 20%~ 80%RH
保管環境温度・湿度	0℃~ 40℃ / 20%~ 80%RH (凍結無き事)
質量	300g
外形寸法 (W×D×H)	63×79×231 (mm) ※ノズル、突起部を除く
付属品	ノズル 5種各1本 専用充電ケーブル (約 70cm,USB Type-A - 専用コネクタ) 取扱説明書

※オゾン水濃度は、当社測定条件によります。使用環境や使用する水質、水温によって変動します。

※本製品は、改良のため予告なく仕様変更する場合がありますので予めご了承ください。

メンテナンス

【 メンテナンス 】

ノズルは消耗部品です。定期的な交換が必要です。
6ヶ月を目安に交換することをおすすめします。

1日2回の使用で約3年の寿命を想定しています。防水性を担保するため、バッテリーの交換はお客様ご自身で行うことはできません。

交換をご希望の際はご購入販売店またはお問い合わせ先までご連絡ください。

部品寿命は使用環境、使用時間によって前後する場合があります。

【 リサイクル 】

本製品に内蔵されている充電式リチウムイオン電池はリサイクルできます。

充電式電池の取り外し、交換はお客様が行わず、ご購入販売店またはお問い合わせ先までご相談ください。



【 廃棄 】

本製品、付属品、梱包材の廃棄は地方自治体のルールに従ってください。
条例の内容については、地方自治体にお問い合わせください。

保証規定

1. 保証書に記載の保証期間内に、取扱説明書、本体添付ラベル、その他注意事項に従って正常な使用状態で故障した場合には、本保証規程の記載内容に基づき、無償で対応いたします。
2. 保証期間内に故障し、無償対応を希望される場合は、お買い上げの販売店にご連絡いただき、製品と併せて保証書をご提示のうえ、対応を依頼してください。
3. 保証期間内でも、次の場合には有償での対応となります。
 - (1) 使用上の誤り、改造または不当な修理による故障もしくは損傷。
 - (2) お買い上げ後の移動、落下、引越または輸送等による故障もしくは損傷。
 - (3) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災事変、公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧またはその他外部要因による故障もしくは損傷。
 - (4) 保証書の所定事項の未記入または字句を書き換えた場合。
 - (5) 保証書を滅失し、または著しい毀損のためご提示いただけない場合。
 - (6) 保証書、レシートまたは領収書等のご提示がないため、製品の購入日時が確認できない場合。
 - (7) 消耗部品の交換および保守に係る費用。
 - (8) 製品の正常な機能に関わらない経時劣化。
4. 当保証は日本国内においてご使用の場合に限り有効です。
5. 保証書の再発行は承っておりませんので、大切に保管くださいますよう、お願いいたします。

○贈答品・個人間売買等で、保証書に記載の販売店に対応を依頼できない場合は、弊社までご相談ください。

○お客様の個人情報は、厳重な管理のもと、弊社プライバシーポリシーに則り、アフターサービスの提供および関連性のある目的の範囲内において、適正に利用いたします。

保証書

本書は下記の保証期間内に故障が発生した場合、前ページの保証規程に基づき無償修理を行うことをお約束するものです。太枠内にお名前、ご住所、電話番号をわかりやすくご記入ください。

品名	デントピースジェット
型式	TT-DPJ01
製造番号（製品底面に記載の番号を記載してください）	


お客様の情報をご記入ください

フリガナ	-----
お名前	
ご住所	〒
電話番号	() -

お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より 1 年間
販売店名・住所・電話番号	

【お問い合わせ先】

株式会社タムラテコ

 0120-038-904

住所 大阪府東大阪市長田東 2-1-33 長田平成ビル 4F

受付時間 10:00 ~ 17:00

※土曜・日曜・祝日・夏季・年末年始休業日を除く

TT-DPJ01-20251229